


W poszukiwaniu komfortu pracy!

Kolejny krok w skalingu ultradźwiękowym:

Technologia Tap-On™

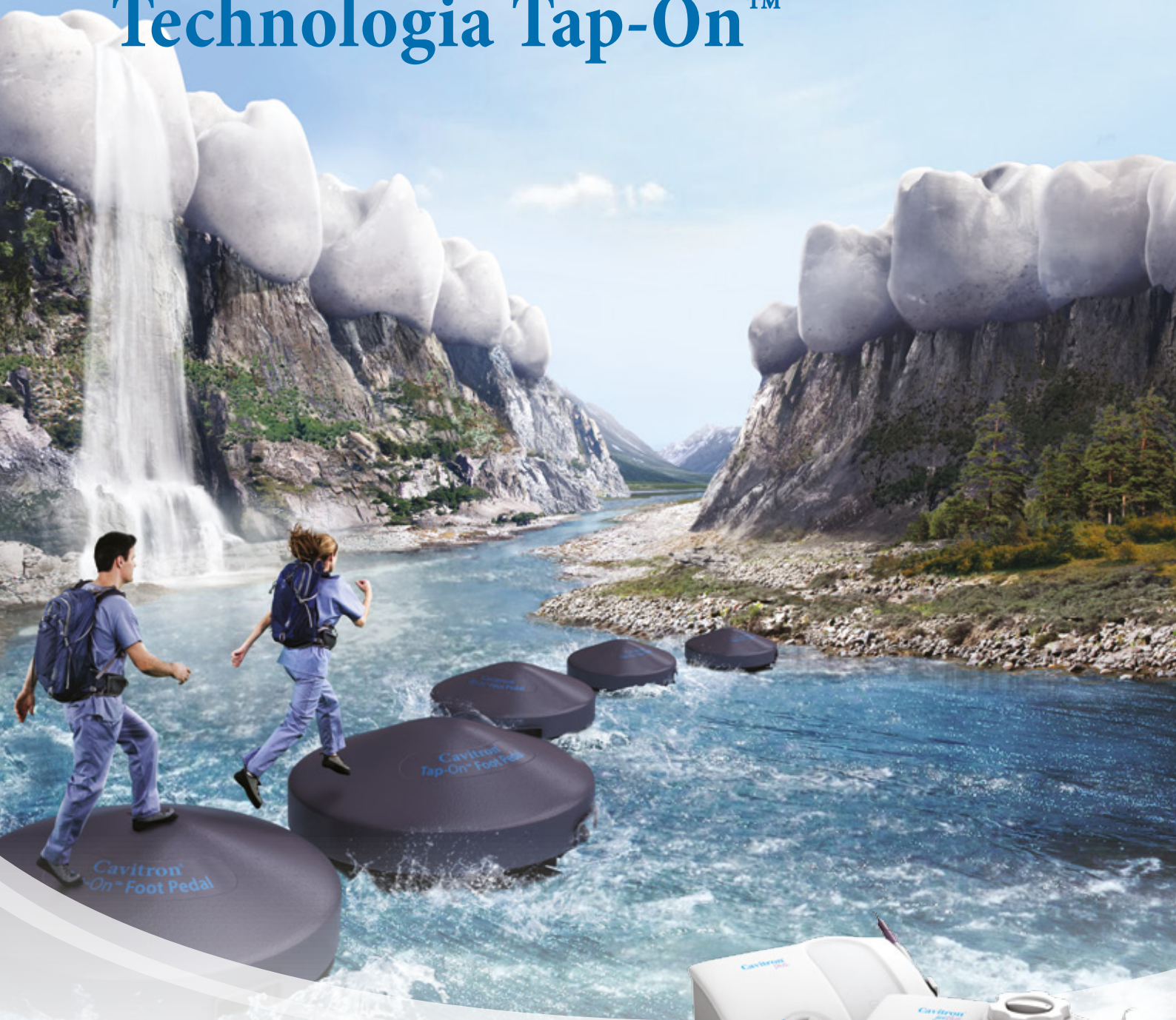

Cavitron®



For better dentistry

DENTSPLY

Cavitron® plus:



Teraz z **Tap-On™ Technology**

Potwierdzona skuteczność systemów Cavitron® –
teraz w połączeniu z Technologią Tap-On™

Nowe urządzenia są wyposażone w dodatkowe funkcje:


NOWOŚĆ!

Zwiększenie komfortu pracy higienistki

- **Technologia Tap-On™** pozwala na uruchomienie funkcji skalingu lub pisakowania tylko jednym przyciśnięciem pedału nożnego. Dzięki temu podczas zabiegu stopy pozostają w spoczynku.
- **Nowy tryb pracy Prophy Mode Auto Cycles** umożliwia automatyczną zmianę pomiędzy pisakowaniem i płukaniem bez konieczności dotykania pedału nożnego*

Udoskonalona skuteczność kliniczna

- Opcje zwiększania mocy obejmują **tryb turbo**, który po jednorazowym przyciśnięciu dostarcza o 25% mocy więcej oraz **tryb boost** uruchamiany naciśnięciem pedału nożnego.
- Ulepszony mechanizm kontroli przepływu wody w końcówce pozwala na precyzyjną oraz wygodną regulację płukania, do poziomu preferowanych ustawień.

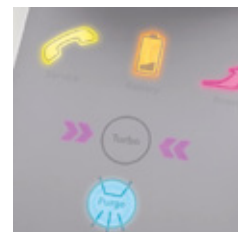

* Tryb Prophy Mode Auto Cycles dostępny tylko w przypadku Cavitron® JET Plus

Cavitron® jetplus:

Piaskowanie

Wielu klinicystów preferuje zabieg skalingu w porównaniu do tradycyjnego stosowania past profilaktycznych ze względu na mniejszą abrazyjność w stosunku do szkliwa. Nowa funkcja modelu Cavitron JET Plus o nazwie Prophy Mode Auto Cycles oferuje automatyczną zmienność trybu piaskowania oraz płukania. W ten sposób wyeliminowano potrzebę ciągłego naciskania pedału celem zamiany wodnego sprayu na powietrze/wodę/piasek. Lekarz może bardzo łatwo dokonać wyboru pomiędzy czasem trwania profilaktycznych cykli-brak (tryb manualny), krótki, średni lub długi. Omawiana funkcja pozwala lekarzowi indywidualnie ustawiać parametry zabiegu dla każdego pacjenta w zależności od ilości i rodzaju usuwanych złogów nazębnych.

Technologia Tap-On™ oraz tryb Prophy Mode Auto Cycles zostały opracowane w celu poprawy efektywności pracy oraz minimalizacji nadmiernego napięcia nóg u higienistek. Operator nie ma już potrzeby ciągłego trzymania nogi na pedale podczas zabiegu piaskowania.



PLUS wszystkie zalety i korzyści jakich należy oczekiwać od systemu Cavitron®:

Blue Zone™

- Poszerzony zakres niskich częstotliwości drgań w celu podniesienia komfortu pacjenta podczas poddziąstwowego skalingu.

Sustained Performance System: SPS™

- Automatyczne dostosowanie mocy niezależnie od wartości siły przyłożenia oraz warunków klinicznych w celu zachowania stałego zasięgu pracy końcówki roboczej.
- Działa na podobnej zasadzie jak tempomat utrzymując efektywność skalingu nawet przy najniższych ustawieniach mocy.

Tryb Boost

- Po naciśnięciu pedału nożnego zwiększa moc o kolejny poziom.
- Tymczasowy tryb zwiększania mocy to szybkie usuwanie dużych złogów nazębnych.

Tryb Płukania

- Po włączeniu poziomu kontroli mocy w zakresie oznaczonym kolorem niebieskim, płukanie bez efektu kawitacji umożliwia irygację lub wypłukiwanie złogów nazębnych w danym obszarze zabiegowym.

Niemal jedna trzecia osób profesjonalnie wykonujących zabiegi stomatologiczne jako powód przejścia na wcześniejszą emeryturę podaje choroby układu mięśniowo-szkieletowego.

Burke FJT et al. Br Dent J.



Cavitron® Select™ SPS™

- Steri-Mate® to niezawodność sterylizacji w autoklawie (750+ cykli)
- Końcówki pracujące zaopatrzone w szybkozłaczki
- Automatyczna funkcja „power boost”
- 500 ml zbiornik na roztwory płuczące
- Urządzenie przenośne typu podłącz & pracuj



Przenośne urządzenie kompaktowe zapewnia kliniczną efektywność, redukuje przerwy zabiegowe oraz przyczynia się do wzrostu wydajności klinicznej. Cavitron® Select™SPS™ łączy w sobie zalety przenośnego urządzenia typu podłącz & pracuj ze skutecznością wymaganą zarówno przez specjalistów w dziedzinie periodontologii jak i przez higienistki stomatologiczne.

Cavitron® Plus™ | Cavitron® Jet Plus™

- Nowa Technologia Tap-On™ aktywuje jednorazowym przyciśnięciem pedału nożnego czynność skalingu lub piaskowania.
- Nowy tryb Prophy Mode Auto Cycles.
- Opcje dodatkowego wzrostu mocy obejmują tryb turbo po jednokrotnym przyciśnięciu.
- Ulepszona kontrola przepływu wody.
- Steri-Mate® to niezawodność sterylizacji w autoklawie (750+ cykli)

Informacje dotyczące zamówień

Cavitron® Plus™ Ultrasonic Scaling Unit

ReOrder
(230 V, EU)..... 8184001

Cavitron® Jet Plus™ Ultrasonic Scaler and Air Polishing System

ReOrder
(230 V, EU)..... 8187501

Cavitron® Select™ SPS®

ReOrder
1x Cavitron® Select™ SPS® ze zbiornikiem,
1x 30K FSI® 1000 końcówka pracująca81313E
1x Cavitron® Select™ SPS® bez zbiornika,
1x 30K FSI® 1000 końcówka pracująca 81307E

Cavitron® Prophy Powder

Prophy-Jet®

Orzeźwiający smak miętowy proszku Cavitron Prophy-Jet, który doskonale usuwa osady zewnątrzpoходne oraz płytkę nazębną.

ReOrder..... 130002V

JET-Fresh®

Formuła proszku pozbawionego sodu dobrze usuwa trudne osady i doskonale sprawdza się u pacjentów na niskosodowej diecie.

ReOrder..... 130203

